

Инструкции за употреба за



Изкачване на стълби на *motion cardio line 900* & *motion cardio line 900 med*



motion stair 900
motion stair 900 med

Съдържание

1.	Обща информация	3
2.	Класификация на устройствата	3
3.	Инструкции за безопасност	4
	Безопасен монтаж на устройствата	4
	Безопасно обучение.....	5
	Показания и противопоказания	6
4.	Работа с дисплея	7
	Преглед на функциите на дисплея/бутоните	7
	Избор на програма.....	8
	Импулсни системи	8
	Индуктивно зареждане (по избор).....	9
5.	Грижа, поддръжка и сервизно обслужване	9
	Инструкции за откриване на състоянието на повреда (повреда).....	12
	Инструкции за поддръжка за оператора.....	12
	Поддръжка от оторизиран специалист	12
	Калибриране/поддръжка	13
6.	Технически данни*	13
7.	Изхвърляне на отпадъци	13
8.	Гаранция.....	14

1. Обща информация



Прочетете внимателно тези инструкции за употреба, включително всички инструкции за безопасност и предупреждения, **преди да използвате** учебното оборудване за **първи път**, за да сте сигурни, че то се използва безопасно и по предназначение. Съхранявайте този документ за бъдещи справки и го предавайте, ако предавате устройството.

Предназначението на устройствата е кардиопулмонално обучение и възпроизводимо натоварване на организма, например за диагностични и терапевтични мерки. Оборудването се използва основно от потребители в областта на кардиологията, физиотерапията, спортната медицина и в домашни условия. Те се използват и за изграждане и укрепване на скелетната мускулатура и за увеличаване на подвижността на ставите, засегнати по време на тренировката.

Оборудването дава възможност за възпроизводимо физическо натоварване на човешкото тяло и сърдечно-съдовата система за целите на превенцията, рехабилитацията и диагностиката.

Текстът със сив фон обозначава текстовите раздели, които се отнасят изключително до функциите на оборудването на уредите от линията Fitness.


2. Класификация на устройствата

- Устройствата *cardio line med* са медицински продукти **MD** в съответствие с Директива ЕС 2017/745, категоризирани в клас IIa. В обхвата на управление на спирачката точността на дисплея е +/- 5%.
- Устройствата за *кардио линия отговарят* на стандартите DIN EN ISO 20957-1 и DIN EN ISO 20957-5; клас на приложение S (търговска употреба/студио) и H (домашна употреба) с клас на точност A +/- 10 % и са предназначени изключително за сектора на фитнеса и спорта.


Само един човек може да се обучава на оборудването едновременно; максималното тегло на потребителя, посочено на табелката с данни, не трябва да се превишава.

3. Инструкции за безопасност


Безопасен монтаж на устройствата

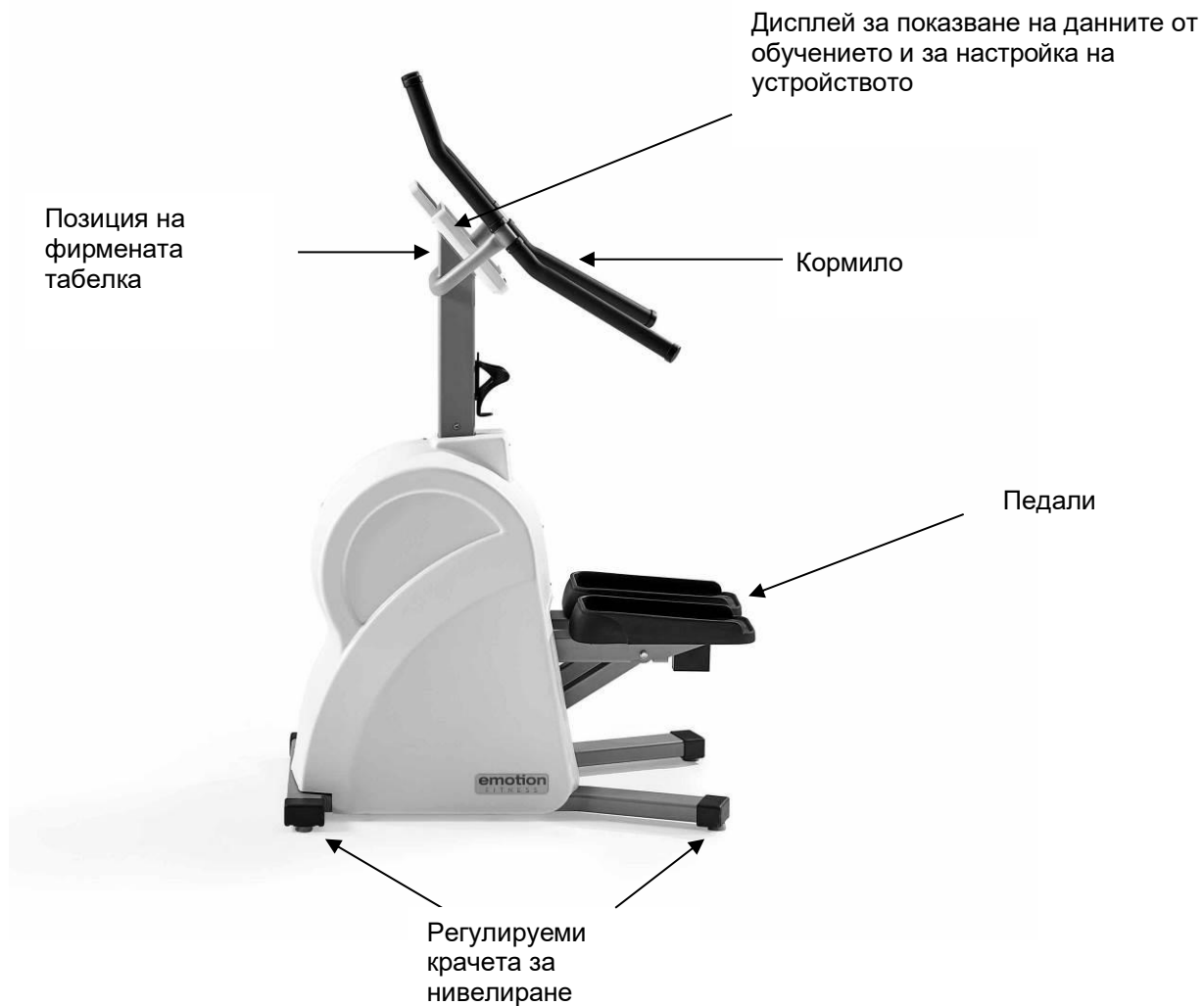

Фиг. 1: Страничен изглед на устройството с обозначение на основните елементи

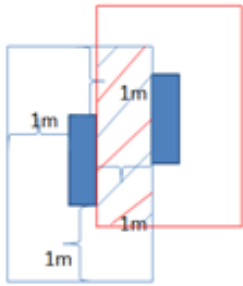



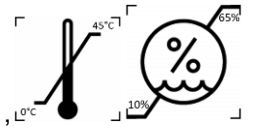

- Поставете уреда върху твърда, хоризонтална, равна и нехлъзгава повърхност и го изравнете с помощта на регулиращите винтове, така че да не се клати.
- Свободното пространство около уреда трябва да бъде с поне 1 метър по-голямо от зоната на движение на уреда, за да се осигури безопасен достъп и излизане от уреда, дори при спешни случаи. Въпреки това свободните пространства за безопасност могат да се припокриват (вж. илюстрацията).



- Поставяйте уреда само в сухи помещения на адрес , 10°C .
- Уверете се, че няма електромагнитно излъчване, напр. от радиоантени, излъчващи флуоресцентни лампи и т.н., тъй като те могат да повлияят на измерването на импулсите.
- Долната страна на рамката винаги трябва да е свободна, за да се осигури подходяща вентилация.
- Всички изброени тук устройства са независими от мрежата. Те генерират собствено захранване по време на работа или се захранват по време на програмиране от стандартно инсталирания кондензатор. Кондензаторът се зарежда по време на обучението и има експлоатационен живот от > 20000 цикъла.
- Внимание: Моля, винаги спазвайте инструкциите за грижи, поддръжка и обслужване в глава 5 на това ръководство.

Безопасно обучение

- Преди започване на обучението годността за обучение трябва да бъде проверена от упълномощено лице, например лекар. Моля, вижте раздела "Показания и противопоказания".
- Моля, имайте предвид, че прекомерното обучение може да бъде вредно.
- Ако почувствате гадене или замаяност, незабавно прекратете обучението и се консултирайте с лекар.
- Тренировките върху оборудването са разрешени само с неповредена кожа.
- Когато тренирате, е препоръчително да носите плътно прилепнало, леко спортно облекло, което не може да се закачи за частите на устройството по време на тренировка. Винаги носете подходящи спортни обувки, за да осигурите сигурно стъпване върху педалите.
- Преди да започнете обучението, проверете устройството за стабилност, дефектни части или възможни манипулации. Ако сте открили някакви дефекти или не сте сигурни, попитайте ръководителя, преди да започнете обучението.
- Преди започване на обучението трябва да се гарантира, че никой не се намира в близост до движещите се части, за да се избегне застрашаването на трети лица. По-специално, децата без надзор трябва да бъдат държани далеч от оборудването.
- **Внимание:** Стъпалата, върху които потребителят стои по време на тренировката, се повдигат до горното изходно положение с помощта на достатъчно силни пружини. За да се гарантира, че отскачащите стъпала няма да причинят наранявания, при качването върху устройството трябва да се вземат следните мерки
 - Застанете пред устройството и се хванете с ръце за кормилото.
 - Първо поставете единия си крак върху педала и го натиснете до пода.
 - Прехвърляте тежестта на тялото си изцяло върху този педал.
 - Сега натиснете другия педал към пода с другия крак.
 - И двата педала са свалени
 - Сега започнете да въртите педалите с двата крака и навлезте във функционалната зона на движението по стълбите. Ако се изпълнява правилно, няма да ударите горната или долната крайна точка с педала.
 - Ако искате да спрете тренировката отново, спуснете се надолу с двата педала, докато докоснете земята.
 - Сега бавно повдигнете педала, като упражните достатъчно противоналягане.
 - Ако педалът е на горния ограничител, можете да поставите крака си на пода пред устройството и да оставите другия педал да се движи нагоре по същия начин.
 - Ако и вторият педал е на горния ограничител, свалете крака си от педала.
 - Упражнявайте се да се качвате и слизате от устройството няколко пъти, за да можете да го използвате безопасно - дори ако сте достигнали определено ниво на умора след тренировка.

-  **Предупреждение:** Системата за следене на сърдечния ритъм е предразположена към неизправности. Прекомерното обучение може да доведе до опасни наранявания или смърт. Ако се почувствате зле, незабавно прекратете тренировката и се консултирайте с вашия лекар или терапевт.
-  **Предупреждение:** Уредът може да се използва само с корпуса и в сухи помещения.
-  **Предупреждение за опционално свързване на захранването:** Използвайте само одобрени захранващи блокове, които са тествани в съответствие с IEC 60601-1 и са одобрени от производителя на уреда. Уверете се, че щепселът е монтиран по такъв начин, че да е трудно да бъде изключен (напр. през подови кутии, монтаж под уреда или кабелни канали, разположение на захранващия блок на труднодостъпни места).
-  **Предупреждение:** Ако медицинското изделие се модифицира, трябва да се извършат подходящи тестове и проверки, за да се гарантира продължителната му безопасна употреба. Изделието не трябва да се модифицира без разрешението на производителя.

Показания и противопоказания

Преди да започнете тренировка, моля, консултирайте се с лекар или терапевт, за да се уверите, че сте подходящи за тренировка.

Примерни индикации

- Мобилност на опорно-двигателния апарат
- Укрепване на мускулите
- Укрепване на сърдечносъдовата система

Примери за противопоказания

- Сърдечно-съдови заболявания
- Болки в мускулно-скелетната система
- По време на обучението:
 - Болка в областта на гърдите
 - Дискомфорт
 - Гадене
 - Замайване
 - Недостиг на въздух

Посъветвайте се с Вашия лекар, ако приемате лекарства.

4. Работа с дисплея

Три или девет тренировъчни програми дават възможност за индивидуално и разнообразно обучение с motion stair 900 и motion stair 900 Med.

	stair 900 / 900 med
Основно оборудване	Бърз старт, тренировка за време, тренировка за пулс
вкл. програмен пакет	Бърз старт Квалификация Пулсово обучение + 6 допълнителни програми

Преглед на функциите на дисплея/бутоните



Бутон Home



ПАУЗА



STOP

ИГРАЙТ
Е

Фиг. 2: Изглед на монитора, за да се обяснят функциите на бутоните, действителният изглед може да се различава по цвят, но предназначението на бутоните е същото.

Обяснение на бутоните:

- **Home бутонът** е физически бутон под стъклото на дисплея. Натиска се, за да влезете в главното меню. При продължително натискане (поне 6 секунди) на бутона HOME се нулира електрониката на монитора.
- Натиснете бутона **PAUSE** за да спрете тренировката.
- Обучението може да започне или да се възобнови с натискане на бутона **PLAY** .
- Бутонът **COOL** прекратява незабавно тренировката. Незабавно се създава обобщение на резултатите от обучението, което се показва и при необходимост се изпраща към съвместим софтуер за управление на обучението.
- Използвайте **бутон "+" или "-"**, за да увеличите или намалите параметрите или стойностите на мощността, които трябва да бъдат зададени.
- Използвайте **бутоните със стрелки, за да** преминете през съответните менюта и да потвърдите стойности или настройки.
- Можете да навигирате в избора на програми чрез жестове за плъзгане/премахване.

В зависимост от програмата се показват някои от следните параметри:

- Име на програмата.
- Време: завършено или оставащо време за обучение.
- Сърдечен ритъм: Дисплей на сърдечния ритъм, когато използвате съвместим колан с предавател на сърдечен ритъм. Индикаторът на сърдечния ритъм показва текущия диапазон на сърдечния ритъм за програми с цели или максимален сърдечен ритъм. Индикаторът за профил на дисплея показва прогресията на диапазона на интензивност по време на тренировката.
- Watt: Мощността се показва във ватове. Едновременно с това интензивността се показва графично в профила.
- km/h: Фиктивната скорост се показва в km/h.

- Скорост: обороти на педалите в минута.
- L/R (не за тяло 900/900 med): Тук се показва съотношението на силата на левия и десния крак в %.
- HRV: Вариабилността на сърдечния ритъм се показва чрез стойността RMSSD (изисква сензор **POLAR** H10).
- респ: Честота на дишане (изисква сензор **POLAR** H10)
- км: Добавено или оставащо разстояние. Дисплеят е в метри; от 1000 м на стъпки по 10 м (1,00 км).
- K-Cal: консумация на добавени или останали калории.
- Ниво: Ниво на интензивност 1 - 21.
- ∅ Ако параметрите са допълнени с този символ, това са средни стойности.


Резултати

След приключване на тренировъчната програма или при преждевременното ѝ прекратяване чрез COOL ❄️, резултатите се показват на монитора и се извършва 3-минутно охлаждане. Това може да бъде отменено чрез бутона HOME.

Някои от стойностите са осреднени (ватове, км/ч, скорост, сърдечен ритъм, височинни метри/мин), а други са кумулативни (километри, K-Cal, време, височинни метри). Средните стойности са отбелязани със символа ∅. Тези резултати дават възможност да се наблюдава развитието на личното представяне и по този начин служат за мотивация.

Избор на програма

Желаната програма за обучение може да се избере в главното меню, като се докосне съответната икона. След това ще бъдете прехвърлени към страницата за конфигуриране, където можете да зададете съответните параметри на обучението. Натиснете бутона **PLAY** ▶️, за да потвърдите въведените данни и да стартирате програмата за обучение. Можете да се върнете в главното меню чрез иконата за начало или бутона за начало.

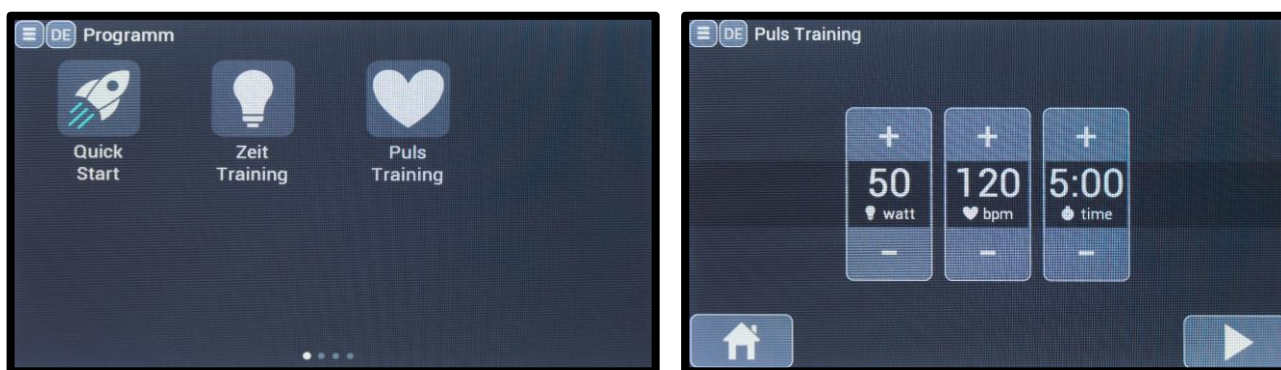

Фиг. 3: Избор и конфигуриране на програма за ръчно обучение.

Импулсни системи

Устройствата **motion cardio line 900** и **motion cardio line 900 med** са оборудвани с оригиналната пулсова система **POLAR**, която стандартно използва гърдна каишка за записване на сигналите. Това дава възможност за индивидуално обучение по различни програми. Безжичното предаване на данни към електрониката на дисплея е кодирано (чрез 5kHz или Bluetooth®). Новата технология за "автоматично сдвояване" на **POLAR** се основава на сигурно и без смущения предаване на данни чрез Bluetooth. Тази технология изисква използването на предавателите H10 или H9. Други параметри, като HRV и честота на дишане, също се предават към монитора чрез връзката Bluetooth®.

Ако се използват старите предаватели, напр. с код T31, е налице низходяща съвместимост. Въпреки това трябва да се отбележи, че е възможно да има смущения при предаването на сигнала чрез технологията 5 kHz.

Цвятът на мигащия символ на сърцето показва използваната технология.

светлосиньо=Bluetooth зелено=5kHz

ANT+

Устройствата **motion cardio line 900** и **motion cardio line 900 med** позволяват опционално предаване на данни чрез ANT+ в допълнение към предаването на данни за сърдечния ритъм чрез 5kHz/Bluetooth®. За тази цел е необходим пакетът Performance. Устройствата **motion cardio line 900** и **motion cardio line 900 med** автоматично разпознават

Полярен 5kHz/Bluetooth® сигнал или ANT+ сигнал. За да сдвоите сензор на ANT+, потребителят вече трябва да е в желаната тренировъчна програма и съответният сензор трябва да е представен в близост до вградената радиоантена в монитора.

Тъмносиният мигащ символ на сърцето потвърждава предаването на сърдечния ритъм чрез ANT+.



Фиг. 11: Свързване на ANT+ сензор за предаване на данни за сърдечния ритъм

Инструкции за безопасност в съответствие с DIN

Предупреждение! Системите за следене на сърдечния ритъм могат да бъдат неточни. Прекомерното трениране може да доведе до сериозно увреждане на здравето или смърт. Незабавно прекратете тренировката, ако почувствате замаяване или припадък.

Индуктивно зареждане (по избор)

Допълнителен модул за индуктивно зареждане може да се активира на всички устройства motion cardio line 900 и motion cardio line 900 med чрез "пакет за свързване". Това позволява безконтактно зареждане на мобилни устройства, които отговарят на стандарта Qi (Ψ). На притежателите на пейсмейкъри или имплантирани дефибрилатори (ICD) се препоръчва да спазват минимално разстояние от 10 см от зарядната bobина.









5. Грижа, поддръжка и сервизно обслужване

Цялото кардио оборудване на emotion fitness е издръжливо и не изисква особена поддръжка, за да функционира дълго време като тренировъчно оборудване. Въпреки това необходимите грижи трябва да се извършват съвместно.

⚠ Предупреждение: Устройството може да се отваря само от оторизиран специалист.

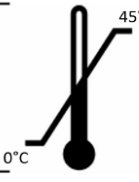Символи и значение

Знак за безопасност	Справка	Заглавие
	ISO 7010-P017	Забранено натискане
	ISO 7010-W012	Предупреждение, електричество
	ISO 7000-1641	Инструкции за употреба

<p>Sicherheitshinweis gemäß DIN EN ISO 20957</p> <p>Warnung! Systeme der Herzfrequenzüberwachung können ungenau sein. Übermäßiges Trainieren kann zu ernsthaftem gesundheitlichem Schaden oder zum Tod führen. Bei Schwindel- Schwächegefühl sofort das Training beenden.</p>	<p>DIN EN ISO 20957</p>	<p>Инструкции за безопасност за наблюдение на сърдечния ритъм</p>
	<p>ISO 7000-3082</p>	<p>Производител</p>
	<p>ISO 7000-2497</p>	<p>Дата на производство</p>
	<p>ISO 7000-0632</p>	<p>Ограничение на температурата</p>
	<p>ISO 7000-2620</p>	<p>Влажност, ограничение</p>
	<p>ISO 7010-W001</p>	<p>Общ предупредителен знак</p>
	<p>ISO 7010-M002</p>	<p>Следвайте инструкциите за употреба</p>
	<p>IEC 60417-5840</p>	<p>Част за приложение тип В (важи за седлото, педалите и кормилото)</p>
	<p>ISO 15233</p>	<p>Медицинско устройство</p>

Нивото на безопасност на уредите може да се поддържа само ако уредите се проверяват редовно за повреди и износване. Дефектиралите части трябва да се заменят незабавно и уредът трябва да се изключи, докато бъде ремонтиран.

Диагностика на неизправностите

Възможно е да се появят следните съобщения за грешка. Ако грешката се показва многократно, изброените по-долу мерки могат да помогнат за отстраняването ѝ. Ако те не доведат до успех, трябва да се свържете с производителя и, ако е необходимо, с производителя на софтуера.

Съобщение за грешка	Мярка/и	Засегнати типове устройства
"check heart sensor?"	Мониторът иска да стартира програма, която изисква носенето на сензор за сърдечен ритъм. Ако не е намерен сензор, се показва това съобщение. → Проверете сензора за пулс.	Всички устройства от линията motion cardio 900
"FBB:Incomplete frame"	Грешка FBB (Fly-By-Bluetooth®); когато е достигнат краят на предаваното съобщение, но то все още не е завършено. → Свържете се с производителя на софтуера или производителя на устройството.	Всички устройства от линията motion cardio 900 → възниква само при системна интеграция
"FBB:Bad packet type"	Грешка на FBB; софтуерът на компютъра е изпратил непознат тип съобщение. → Свържете се с производителя на софтуера или производителя на устройството.	Всички устройства от линията motion cardio 900 → възниква само при системна интеграция
"FBB:Bad block check"	Грешка на FBB; проверката на блока (генерираната контролна сума) не съвпада с очакваната проверка на блока. → Свържете се с производителя на софтуера или производителя на устройството.	Всички устройства от линията motion cardio 900 → възниква само при системна интеграция
"FBB:Missing ETX"	Грешка на FBB; краят на съобщението не съответства на символа "Краят на съобщението". → Свържете се с производителя на софтуера или производителя на устройството.	Всички устройства от линията motion cardio 900 → възниква само при системна интеграция
"FBB:Parser failed"	Грешка на FBB; съобщението от компютъра не отговаря на определения формат на съобщението. → Свържете се с производителя на софтуера или производителя на устройството.	Всички устройства от линията motion cardio 900 → възниква само при системна интеграция
"FBB:UID mismatch"	Грешка на FBB; идентификаторът на потребителя, изпратен в съобщението за вход, не съвпада с идентификатора на потребителя от програмното съобщение. → Свържете се с производителя на софтуера или производителя на устройството.	Всички устройства от линията motion cardio 900 → възниква само при системна интеграция
"Program not allowed"	Грешка FBB; софтуерът е изпратил програма, която не е разрешена в устройството. → Изберете друга програма в компютъра или Свържете се с производителя на устройството, за да го закупите.	Всички устройства от линията motion cardio 900 → възниква само при системна интеграция
"FBB:Missing input: ##"	Грешка FBB, параметър ## липсва в съобщението за програмата, но е необходим (програмата не е стартирана). → Свържете се с производителя на софтуера или производителя на устройството.	Всички устройства от линията motion cardio 900 → възниква само при системна интеграция
"Par ## out of range: ###<##<##<###"	Необходимият параметър за настройка е изпратен към устройството от компютърния софтуер извън допустимия обхват. → Свържете се с производителя на софтуера.	Всички устройства от линията motion cardio 900 → възниква само при системна интеграция
"Profile> 50 steps"	Съобщение за грешка, ако трябва да се възпроизведе профил с твърде много стъпки. → Намаляване на броя на интервалните стъпки в програмата PC (само за интервална програма) или се свържете с производителя на софтуера или на устройството.	Всички устройства от линията motion cardio 900 → се появява само при системна

		интеграция и избрана интервална програма
"Infocode: ### (понякога с допълнителен текст)	Показва се номерът на грешката на блока за управление на двигателя MCU6. → Свържете се с производителя на устройството.	h/p/Космос бягаща пътека
"Sprintex Err: A##:###"	Показва се номерът на грешката на контролера Sprintex. → Свържете се с производителя на устройството.	Бягаща пътека Sprintex
"Sprintex Err: \$-\$"	Показва се номерът на грешката на контролера Sprintex. → Свържете се с производителя на устройството.	Бягаща пътека Sprintex
"Sprintex Err: no reply"	Мониторът не получава отговор от контролера Sprintex. → Свържете се с производителя на устройството.	Бягаща пътека Sprintex

Инструкции за откриване на състоянието на неизправност (неизправност)

Ако в устройствата се появят грешки, които не можете да категоризирате, моля, свържете се с emotion fitness GmbH & Co KG. За всяко съобщение за грешка трябва да подготвите серийния номер и типа на модела на повреденото устройство, тъй като това може да е важно, за да може да се направи правилна диагностика и най-вече да ви бъдат предоставени правилните резервни части!

Инструкции за поддръжка за оператора

В идеалния случай проверявайте уреда визуално преди всяка употреба, но поне веднъж дневно, като обръщате особено внимание на дефектни части, разхлабени връзки и нетипични шумове.

Следните проверки трябва да се извършват най-малко на всеки 6 месеца:

- Визуално проверете всички видими връзки и заваръчни шевове.
- Почистете добре уреда.
- Проверете всички винтови връзки за плътност.
- Проверете целостта и здравината на педалите.

Като цяло:

- Почиствайте пластмасовите панели и частите на рамката редовно, ако е необходимо, с влажна кърпа и мек сапун, след което отново избършете до сухо.
- Използването на спрейове с почистващи препарати не е разрешено; доказано е, че уредите никога не изсъхват на недостъпни места. При тази процедура не може да се изключи заразяване с ръжда.
- Уверете се, че в корпуса на монитора не попада течност
- Почиствайте дисплея на монитора само с препоръчани препарати за почистване на дисплеи (<https://www.schupp.shop/therapie-praxisbedarf/praxisbedarf/reinigung-hygiene/displayreiniger?number=3912>)
- Моля, използвайте само дезинфекциращи кърпички mikrozid® sensitive wipes (<http://www.schuelke.com/>) за всяка необходима дезинфекция на устройствата.
- Дисплеят на монитора може да показва, че напрежението на кондензатора е твърде ниско, като в този момент не може да се гарантира, че устройството ще функционира без спиращ ток. Можете да презаредите кондензатора, като въртите педалите с по-голямо натоварване или като използвате захранващ блок, одобрен от производителя на устройството.
- Проверете дали крепежните елементи на корпуса са затегнати.
- Препоръчваме редовна визуална проверка на всички части на уреда, особено на винтовете, заваръчните шевове и други крепежни елементи.
- Проверете дали крачетата на уреда са здраво закрепени.
- Използвайте само оригинални резервни части - моля, свържете се с нас за това.

Поддръжка от оторизиран специалист

В случай на проблеми с устройството, които не можете да разрешите сами, винаги се обръщайте към сервизния център на emotion fitness. Оторизираният сервизен екип ще ви помогне бързо и компетентно или ще ви предостави инструкции.

Калибриране/поддръжка

Законът не предписва МТК за оператора на елиптично оборудване и оборудване за изкачване на стълби (кръстосано и стълбищно). Това се дължи на факта, че телесното тегло на тези уреди оказва влияние върху резултантната мощност. emotion fitness GmbH & Co. KG предлага да калибрира спирачната мощност при поискване.

Освен това препоръчваме компонентите, свързани с безопасността, да се **обслужват** и проверяват от оторизирани служители/партньори на **всеки 12 месеца**.

Този раздел се отнася до правната ситуация в Германия. Моля, проверете приложимите закони за работа с медицински изделия във вашата страна.

Устройствата със суфикс "med" са в съответствие с Директивата за медицинските изделия ЕС 2017/745. Поради това те са етикетирани с маркировката "CE" и номера на нотифицирания орган.

Дистрибуторът/операторът е отговорен за извършването на поддръжката, обслужването и калибрирането, както и за евентуалните проверки в съответствие с приложимите регионални закони и разпоредби на мястото на устройствата!

Допълнителна информация можете да получите и от местния си оторизиран дилър.

6. Технически данни*

Тип устройство	Размери (Д/Ш/В)	Тегло	максимално тегло на	Безопасно работно
motion stair 900 motion stair 900 med	102 см x 73 см x 160 см	79 кг	150 кг	229 кг

Спирачна система: независима от главната спирачна система

Диапазон на мощността: 4-27 м/мин. Скорост на потъване

Свободно колело: налично

Изпълнени са следните директиви на ЕС:

2001/95/ЕО Директива за обща безопасност на продуктите

ЕС 2017/745 Директива за медицинските изделия, клас IIa (изпълнява се само за изделия със суфикс med)

Директива 2014/30/ЕС за електромагнитна съвместимост

Използвани са следните стандарти:

DIN EN ISO 20957-1 Клас на точност А, клас на използване S; DIN EN ISO 20957-5;

DIN EN 60601-1:2013; DIN EN 60601-1-2

* Стойностите могат да се различават поради модификации и опции на устройството.

Възможни са технически и визуални промени и грешки при отпечатването.

7. Изхвърляне на отпадъци

Със сключването на договора за покупко-продажба е договорено, че бизнес клиентите носят отговорност за унищожаването на

Директива 2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване сами.

8. Гаранция

Това се основава на законовата гаранция.

В качеството си на дистрибутор на този продукт emotion fitness GmbH & Co. KG осигурява безплатен сервиз за 12 месеца за части и труд за професионални потребители, ако може да се докаже правилната употреба и грижи, посочени в това ръководство за употреба. В продължение на още 12 месеца emotion fitness GmbH & Co. KG ще извършва безплатна подмяна на резервни части.

Гаранционната претенция отпада, ако продуктът е бил обслужван или ремонтиран от неоторизирани лица. При възникване на гаранционна претенция трябва незабавно да информирате emotion fitness GmbH & Co. KG писмено или по електронна поща. Собственикът на устройството трябва да предостави информация за серийния номер на устройството, времето на закупуване, подробно описание на повредата и източника на доставка.

emotion fitness GmbH & Co. KG ще организира услуга, но си запазва правото да реши вида на услугата.

Възможни са следните процедури:

1. обслужването се извършва на място от нашия сервизен отдел.
2. Ние ще ви изпратим необходимата резервна част.
3. ние ще изпратим устройство за подмяна.

Дефектните части трябва да ни бъдат върнати незабавно от клиента. В противен случай за доставените резервни части ще бъде издадена фактура.

Ако причините са извън обхвата на гаранцията, emotion fitness GmbH & Co. KG си запазва правото да начисли всички разходи за ремонт.

Някои износващи се части не са покрити от гаранцията. Такива са по-специално седлото, кормилото и приставката за кормилото, педалите, примките за педали, тъканите на тапицерията и гумената ръкохватка на кормилото. Системите **POLAR** Pulse се покриват от законовата гаранция.

Тези гаранционни разпоредби не засягат по никакъв начин общите законови претенции.

Актуалната версия на нашите Общи условия за доставка можете да видите и изтеглите от нашия уебсайт на адрес www.emotion-fitness.de.

CE 0633

Благодарим ви за доверието!

emotion
FITNESS

Производител

emotion fitness GmbH & Co KG

Trippstadter Str. 68

67691 Hochspeyer, Германия

Тел. +49 (0) 6305-71499-0

Факс: +49 (0) 6305-71499-111

Интернет: www.emotion-fitness.de

Електронна поща: info@emotion-fitness.de

Производител EUDAMED SRN: DE-MF-000016584

