



## **Kasutusjuhend jalgrattaergomeetrite ja ülakehaergomeetrite reguleeritav väntvõll, mis on mõeldud jalgrattaergomeetrite jaoks**



## 1 Üldine




Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt läbi käesolev kasutusjuhend koos kõigi ohutusjuhiste ja hoiatustega, et tagada ohutu ja nõuetekohane kasutamine. Hoidke seda dokumenti edaspidiseks ja andke see teistele, kui annate seadme edasi.

## 2 Ülevaade

- Tsükkel: raadius reguleeritav vahemikus 75mm kuni 175mm
- Artikli number: Z-EF-AL-011/ Z-MED-AL-011 (meditsiiniline versioon)
- Korpus: raadius reguleeritav vahemikus 75 mm ja 225 mm, käepideme asünkroonse ja sünkroonse asendi vahetamine võimalik.
- Valmistatud täielikult rooste- ja happekindlast roostevabast terasest
- Ohutu ja lihtne reguleerimine - ilma tööriistadeta
- Äärmiselt tugev konstruktsioon

### längenverstellbares Kurbelset Z-MED-AL-011

#### adjustable crank arm set

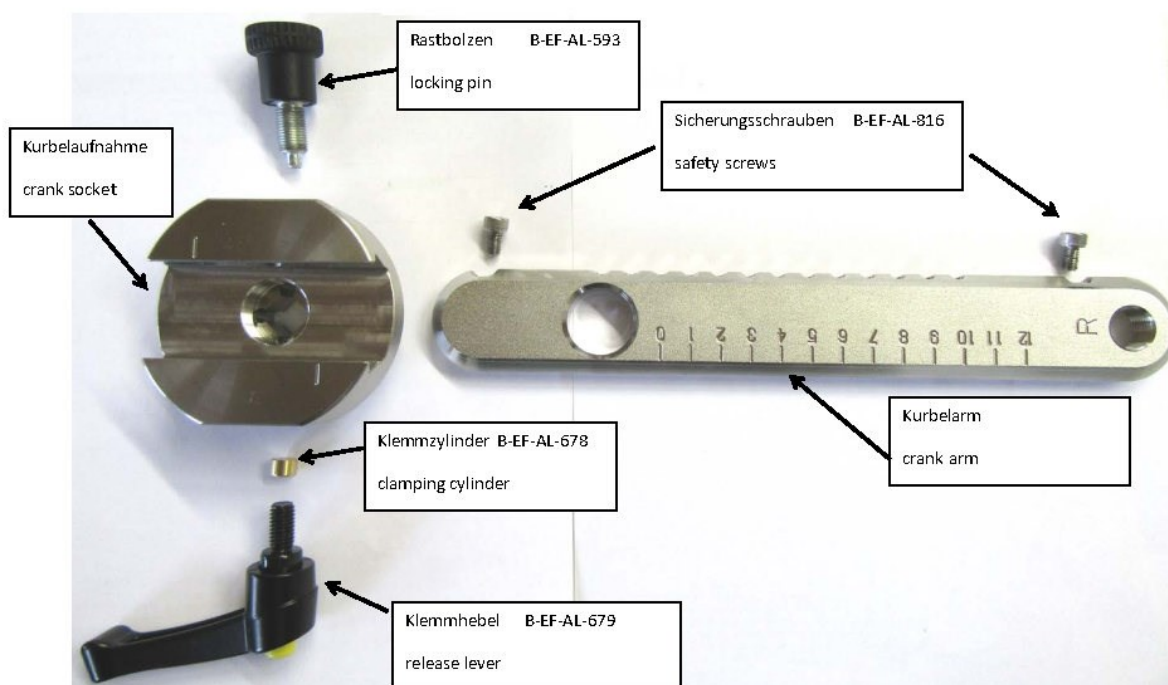

Komponenten ohne Artikelnummer können nicht separat gekauft werden, sondern gehören zu einem kompletten Kurbelset

Parts without article number are not sold separately. They are only available as part of a set of adjustable crank arms

## 3 Hooldus ja hooldus

### Tähelepanu: pingutage uuesti väntasid ja pedaale.

Pärast esimesi 10 töötundi tuleb väntasid ja pedaale pingutada. Kui pedaalid ja käepidemed ei ole pingutatud, võivad tekkida telgede, käepideme või pedaalide kahjustused, mille korral garantii enam ei kehti.

## 4 Kokkupaneku juhised

### 4.1 Kokkupanekuks vajalikud tööriistad:

- Väike augukruvikeeraja
- Lahtine mutrivõtja SW 15 / 17 / 19
- Kuuekandiline muhv SW 14
- Väntvõlli tõmbaja
- Pöördemomendi mutrivõti 60Nm

### 4.2 Samm 1 - Pedaalide eemaldamine

Eemaldage vasak- ja parempoolsed pedaalid, kasutades lahtist mutrivõtit SW15. **Tähelepanu:** vasakul pool avaneb kruviühendus UZS-i sisse, paremal pool UZS-i vastu.

### 4.3 Samm2 - Kruvide ühendamise kruvide lõdvendamine telje külge

Eemaldage väikese augukruvikeeraja abil väike must plastikust kork paremal ja vasakul, mis katab väntvõlli kruviühendust. Nüüd lõdvendage mõlema poole kruviühendused mutrivõtme ja kuuskantvõtme SW abil. 14.

### 4.4 3. samm - väntade tõmbamine telgilt maha

Keerake väljatõmber käsitsi telje kinnituskeermesse. Keerake UZS-i tõmburi 17kruvi lahtise mutrivõtme SW, kuni väntvõll on lõdvenenud; nüüd saab väntvõlli hõlpsasti eemaldada. Eemaldage tõmbaja väntvõllilt lahtise mutrivõtme SW19 ja viige see UZS-i vastu keerates tagasi algasendisse. Jätkake samamoodi teise külje väntmehhanismiga.

### 4.5 Samm 4 - Reguleeritavate väntade paigaldamine


Eemaldage mustad kattedkorgid kahe väntmehhanismi avadelt. Kui hoovad ei ole veel positsioonis o, viige need kokkupanekuks vajalikku positsiooni o, avades klambrikangi ja tõmmates vabastamisnuppu. Hoovad on tähistatud L-ga vasaku poole jaoks ja R-ga parema poole jaoks, palun veenduge, et need on õiges asendis, vastasel juhul võivad pedaalid lahti tulla. Asetage väntvõlv L-ga vasakule poole telje nelinurga peale. Nüüd keerake eelnevalt eemaldatud poldi tagasi telje külge ja pingutage seda 60Nm-ni. Tehke sama ka teisel pool.

### 4.6 Samm 5 - Pedaalide paigaldamine

Pedaalid on samuti tähistatud L vasakule ja R paremale. Paigaldamisel veenduge õiges asendis, et vasakpoolne külg on kruvitud vastu UZS-i ja parempoolne külg on kruvitud UZS-i sisse. Pingutage pedaalid väga tugevalt, muidu võivad need lahti tulla.

## 5 V-kurvi kasutamine

Nagu punktis lühidalt näidatud, saab V-kraanide pikkust reguleerida, lõdvendades kinnitushooba (A) ja tõmmates lukustuspolli (B). Väntmehhanismi asendit saab lugeda küljel olevalt skaalalt. Pärast väntvõlli reguleerimist tuleb kindlasti veenduda, et lukustuspolli (B) on lukustatud ja kinnitushoob (A) on lukustatud ja joondatud väntvõlliga (vt pilti). Kinnituskangi joondatud asendisse viimiseks saab seda lukustatud asendis veidi tõsta ja soovitud asendisse viia. Vastasel juhul võib kasutaja saada vigastada või väntvõll ja masin kahjustada.

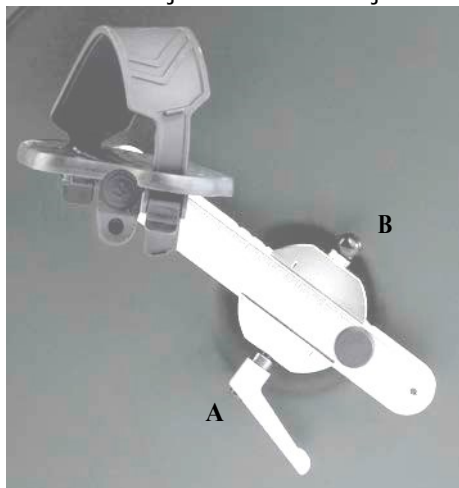

## 6 Garantiid

See põhineb seadusjärgsel garantiil.

EMOTION FITNESS GmbH & Co KG kui selle toote edasimüüja pakub professionaalsetele kasutajatele kuu6 aega tasuta hooldust osade ja tööjõu osas, kui on võimalik tõestada käesolevas kasutusjuhendis loetletud nõuetekohast kasutamist ja hooldust.

Garantiinõue kaotab kehtivuse, kui toodet on hooldanud või parandanud volitamata isikud. Niipea, kui tekib garantiinõue, peate te EMOTION FITNESS GmbH & Co KG-d sellest viivitamatult teavitama. Seadme omanik peab esitama andmed seadme seerianumbri, ostu aja ja tarneallika kohta.

EMOTION FITNESS GmbH & Co KG korraldab teenuse, kuid jätab endale õiguse määrata teenuse iseloomu.

Mõeldavad on järgmised menetlused.

1. Teenindust teostab meie hooldusosakond kohapeal.
2. Saadame soovitud varuosa.
3. Me saadame asenduseadme.

Defektsed osad peab klient tagastama meile 48 tunni jooksul. Vastasel juhul võetakse tasu tarnitud varuosade eest.

Kui põhjused jäävad väljapoole garantiid ulatust, jätab EMOTION FITNESS GmbH & Co. KG endale õiguse nõuda kõik remondikulud.

Garantiid ei hõlma mõningaid kulumisosi. Need on eelkõige sadul, väntvõllid ja väntvõlli kinnitus, pedaalid, pedaalirihmad, patareid, jalatallad, polsterduskangad ja juhtraua haaratsikummid. Polari impulssüsteemidele kehtib seadusest tulenev garantiid.

Need garantiisätted ei mõjuta mingil viisil üldisi seadusest tulenevaid nõudeid.

Meie üldisi tarnetingimusi, mida aeg-ajalt muudetakse, saab vaadata ja alla laadida meie veebilehelt [www.emotion-fitness.de](http://www.emotion-fitness.de).



**emotion fitness GmbH & Co KG**

**Trippstadter Str. 68**

**67691 Hochspeyer**

**Tel +49-6305-71499-0**

**Faks +49-6305-71499-111**

**[info@emotion-fitness.de](mailto:info@emotion-fitness.de)**

**[www.emotion-fitness.de](http://www.emotion-fitness.de)**

**Tootja EUDAMED SRN: DE-MF-000016584**