



Instructies voor gebruik de verstelbare crank voor fietsergometers en ergometers voor het bovenlichaam



1 Algemeen




Lees voor het eerste gebruik deze gebruiksaanwijzing met alle veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen zorgvuldig door om een veilig en juist gebruik te waarborgen. Bewaar dit document voor toekomstig gebruik en geef het aan anderen als u het apparaat doorgeeft.

2 Overzicht

- Cyclus: Radius instelbaar tussen 75mm en 175mm
- Artikelnummer: Z-EF-AL-011/ Z-MED-AL-011 (medische versie)
- Lichaam: radius instelbaar tussen 75 mm en 225 mm, omschakeling van asynchrone naar synchrone stand van de handgrepen mogelijk
- Volledig gemaakt van roest- en zuurbestendig roestvrij staal
- Veilig en eenvoudig af te stellen - zonder gereedschap
- Uiterst robuust ontwerp

längenverstellbares Kurbelset Z-MED-AL-011

adjustable crank arm set

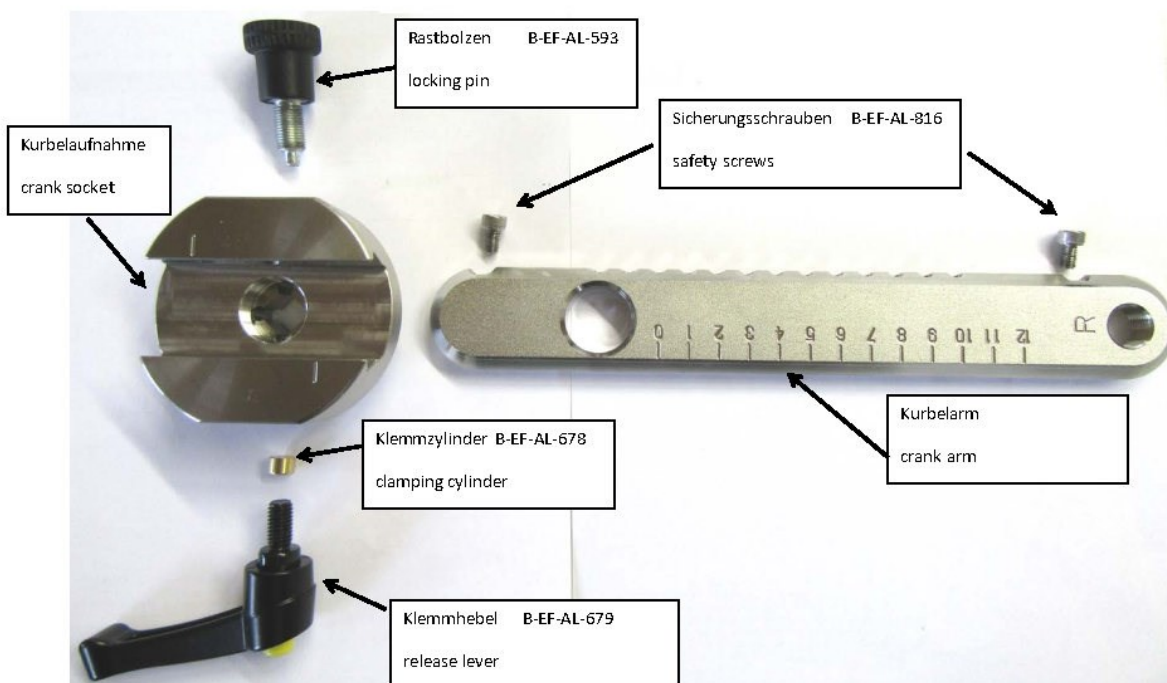

Komponenten ohne Artikelnummer können nicht separat gekauft werden, sondern gehören zu einem kompletten Kurbelset

Parts without article number are not sold separately. They are only available as part of a set of adjustable crank arms

3 Verzorging en onderhoud

Attentie: Zet de cranks en pedalen weer vast.

Na de eerste 10 gebruiksuren moeten de cranks en pedalen worden vastgedraaid. Indien de pedalen en cranks niet zijn vastgedraaid, kan schade aan de as, cranks of pedalen ontstaan, in welk geval er geen garantie meer is.

4 Montage-instructies

4.1 Gereedschap nodig voor de montage:

- Gleufschroevendraaier klein
- Steeksleutel SW 15 / 17 / 19
- Binnenzeskant SW 14
- Krukas trekker
- Momentsleutel ingesteld op 60Nm

4.2 Stap 1 - De pedalen verwijderen

Verwijder de pedalen aan de linker- en rechterkant met de steeksleutel SW15. **Opgelet:** Links opent de schroefverbinding in de UZS, rechts tegen de UZS.

4.3 Stap 2 - Losmaken van de schroefverbinding van de cranks aan de as

Verwijder met de kleine sleufschroevendraaier het kleine zwarte plastic kapje rechts en links dat de schroefverbinding van de krukas afdekt. Draai nu de schroefverbindingen aan beide zijden los met behulp van de momentsleutel en de inbus SW 14.

4.4 Stap 3 - De cranks van de as trekken

Schroef de afzuiger met de hand in de schroefdraad van de asbevestiging. Draai de schroef van de trekker in de UZS met de steeksleutel SW17 tot de krukas is losgekomen, de krukas kan nu gemakkelijk worden verwijderd. Verwijder de trekker van de krukas met steeksleutel SW19 en breng hem terug in de uitgangpositie door hem tegen de UZS te draaien. Ga op dezelfde manier te werk met de slinger aan de andere kant.

4.5 Stap 4 - Monteren van de verstelbare cranks



Verwijder de zwarte afdekkappen van de openingen van de twee krukken. Als de cranks nog niet op stand o staan, breng ze dan op de voor de montage noodzakelijke stand o door de spanhendel te openen en aan de ontgrendelknop te trekken. De cranks zijn gemarkeerd met een L voor de linkerkant en met een R voor de rechterkant, zorg ervoor dat ze in de juiste stand staan, anders kunnen de pedalen losraken. Plaats de crank met de L aan de linkerkant op het vierkant van de as. Schroef nu de eerder verwijderde bout weer in de as met de momentsleutel en zet hem vast met 60 Nm. Doe hetzelfde aan de andere kant.

4.6 Stap 5 - De pedalen monteren

De pedalen zijn ook gemarkeerd met L voor links en R voor rechts. Let bij de montage op de juiste positie en dat de linkerzijde tegen de UZS wordt geschroefd en de rechterzijde in de UZS. Draai de pedalen zeer stevig vast, anders kunnen ze losraken.

5 Gebruik van de V-krank

Zoals in stap 4 kort is aangegeven, kunnen de V-tandwielen in lengte worden versteld door de spanhendel (A) los te maken en aan de borgpen (B) te trekken. De stand van de slinger kan worden afgelezen van de schaal op de zijkant. Na het afstellen van de crank is het van essentieel belang dat de vergrendelingsbout (B) vastzit en dat de spanhendel (A) is vergrendeld en uitgelijnd met de crank (zie foto). Om een uitgelijnde stand van de spanhendel te bereiken, kan deze in de vergrendelde stand iets worden opgetild en in de gewenste stand worden gebracht. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot letsel voor de gebruiker of tot schade aan de slinger en de machine.

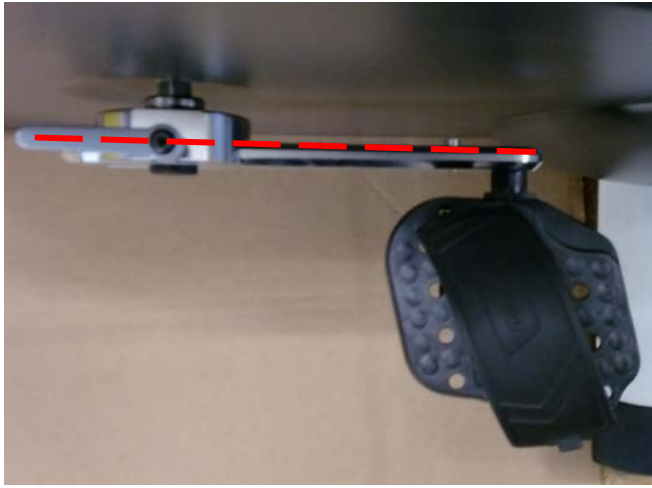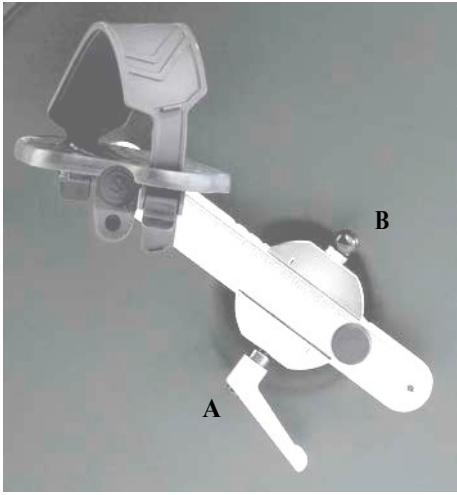

6 Garantie

Dit is gebaseerd op de wettelijke garantie.

EMOTION FITNESS GmbH & Co KG zal als distributeur van dit product gedurende 6 maanden gratis service verlenen op onderdelen en arbeidsloon voor professionele gebruikers indien het juiste gebruik en onderhoud zoals vermeld in deze handleiding kan worden aangetoond.

De aanspraak op garantie vervalt indien het product door onbevoegden is onderhouden of gerepareerd. Zodra zich een garantieclaim voordoet, dient u EMOTION FITNESS GmbH & Co KG hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Informatie over het serienummer van het apparaat, het tijdstip van aankoop en de leveringsbron moet door de eigenaar van het apparaat worden verstrekt.

EMOTION FITNESS GmbH & Co KG zal voor een dienst zorgen, maar behoudt zich het recht voor om de aard van de dienst te bepalen.

De volgende procedures zijn denkbaar.

1. De service wordt ter plaatse uitgevoerd door onze serviceafdeling.
2. Wij zullen het gewenste reserveonderdeel opsturen.
3. Wij zullen een vervangend toestel sturen.

De defecte onderdelen moeten door de klant binnen 48 uur aan ons worden teruggezonden. Anders worden de geleverde onderdelen in rekening gebracht.

Indien de oorzaken buiten de garantie vallen, behoudt EMOTION FITNESS GmbH & Co. KG zich het recht voor om alle reparatiekosten in rekening te brengen.

Sommige slijtageonderdelen vallen niet onder de garantie. Het gaat met name om het zadel, de cranks en de crankbevestiging, de pedalen, de riemen voor de pedalen, de batterijen, de voetstappen, de bekledingsstoffen en het grip rubber op het stuur. Polar pulse systemen vallen onder de wettelijke garantie.

Deze garantiebepalingen hebben geen enkele invloed op de algemene wettelijke aanspraken.

Onze Algemene Leveringsvoorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, kunnen worden ingezien en gedownload op onze website www.emotion-fitness.de.



emotion fitness GmbH & Co KG

Trippstadter Str. 68

67691 Hochspeyer

Tel 06305-71499-0

Fax 06305-71499-111

info@emotion-fitness.de

www.emotion-fitness.de

Manufacturer EUDAMED SRN: DE-MF-000016584